
























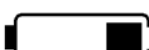









## M2720A Avalon CTS trådløs fosterovervåking

### Advarsler og hvilke tiltak du må gjøre

**Basestasjonens advarsler:**  blinker, alene eller med lamper på hver side.  betyr at lampen er av/permanent på.

 betyr at du hører en lydalarm, hvis denne er innstilt. Trykk  for å kvittere.

**Transduseradvarsler:**  blinker sammen med symbolet som angir problemet.

Hvis du får denne advarselen...		...gjør du slik...
...på basestasjonen...	...på transduseren...	
   + 		Sett transduseren i basestasjonen for å lade batteriet, eller bruk en oppladet transduser.
   + 	 + 	Hvis problemet vedvarer etter en 30 minutters ladeperiode, bytt transduserens batteri. (Se <i>Service Guide</i> .)
   + 		Kontroller at transduseren er aktiv og innenfor området. Kontroller antennetilkoplinger.
  	 + 	Trykk  i to sekunder for å frigjøre en blokkert plass.
 Eksempel på sengenavn	 +  + --	Denne plassen har allerede en <b>aktiv</b> transduser (viser sengenavn 38 i dette eksemplet).
 Eksempel på sengenavn	 +  + 16 Eksempel på sengenavn	Enten sett denne på plass for å gjøre plassen tilgjengelig eller, hvis transduseren viser et sengenavn (16 i dette eksemplet), sett den tilbake på plassen i basestasjonen.
	 + 	Kontakt service (transduseren kan ikke registrere).
	 + 	Hvis det er en aktiv EKG-transduser, kople til kabelen. Sett transduseren på den plassen som er angitt med den svarte sirkelen (transduser i feil plass).
<b>Feilmeldinger på basestasjonen og transduseren (E0 til E9):</b> Se i <i>brugerhåndboken</i>		

© 1995-2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med enerett.

Trykket i Tyskland, april 2006

Best.nr. M2720-9037B

4512 610 14961



Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH

Hewlett-Packard-Str.2


71034 Boeblingen, Tyskland

**PHILIPS**

# M2720A Avalon CTS trådløs fosterovervåking

## Kortfattet bruksanvisning

1 110 - 240 VAC

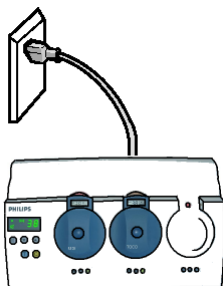


3


**TELE**

Kontroller at det står "TELE" på CTG-apparatet. Dette betyr at det er god forbindelse med Avalon-systemet.


2 Strøm på.

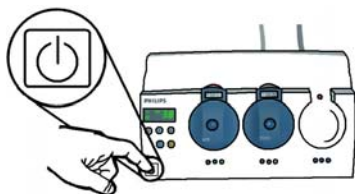

4 Venter på "klar"-lampen.

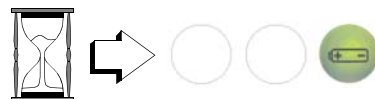


5 Fjern transduseren.

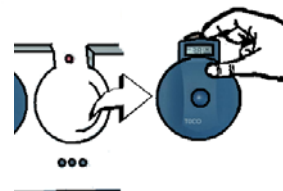

"Klar"-lampen slukker. "RF-forbindelse"-lampen lyser.



6 Fest transduseren (bruk gelé hvis ultralyd).

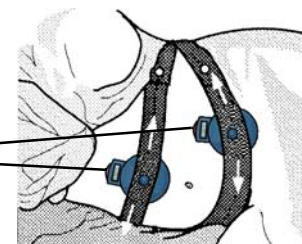



Fest transduseren på beltet når det er god kontakt:



For Avalon-apparater



for apparater i 50-serien.

Bytte fra ultralyd til DEKG		Bytte fra DEKG til ultralyd	
1	Sett ultralydtransduseren på plass.	1	Kople DEKG-overgangskabel og skalpelektroden fra EKG-transduseren.
2	Ta ut EKG-transduseren når lampen  for plassen lyser grønt.	2	Sett EKG-transduseren på plass.
3	Kople DEKG-overgangskabel og skalpelektroden til EKG-transduseren.	3	Ta ut ultralydtransduseren når lampen  for plassen lyser grønt.
4	Start DEKG-registrering.	4	Start ultralydregistrering.

Kople alle vanlige transdusere fra apparatet før du tar i bruk Avalon CTS.

Hvis to aktive transdusere sender FHR til den samme basestasjonen, vises feilmeldingen **E9**. Sett en av transduserne på plass for å slette meldingen.

**Etter bruk: Rengjør transduserne. Sett dem på riktig plass i basestasjonen.**